

Mistral-Air®

Calentador de aire forzado



Rápido

Seguro

Fácil

TSCI

The Surgical Company
International B.V.

Calentamiento con Pasión

Las mantas Mistral-Air® son muy suaves, fuertes y cómodas. La superficie difusa garantiza un rendimiento óptimo y aumenta la capacidad de calefacción. También permite el uso de baja presión, previniendo que la manta flote y permitiendo que se coloque perfectamente.



**Mistral-Air® Calentador
de aire forzado**



**Un Sistema
Rápido, Seguro
y Fácil**

Calentador y manta diseñados en sintonía

Las mantas Mistral-Air® y la unidad de calentamiento Mistral-Air® Plus están diseñados para su uso conjunto el uno con el otro, lo que asegura un rendimiento óptimo y una distribución equitativa de calor en toda la manta.



Unidad de calentamiento Mistral-Air® Plus

La unidad de calentamiento Mistral-Air® Plus es muy potente, silenciosa y proporciona una temperatura constante al paciente en tan sólo 60 segundos. El inicio, por defecto, hasta la temperatura de 38°C garantiza la puesta en marcha inmediata del tratamiento y reduce el riesgo de error humano.

La seguridad es lo primero

Además de la alarma de alta temperatura, la alarma de baja temperatura es un estándar de seguridad que garantiza la temperatura elegida para el paciente.



Mantas Mistral-Air®

La amplia gama de mantas Mistral-Air asegura que hay una manta para cada aplicación, y puede ser utilizada en el calentamiento pre, per y post operatorio.



Mantas Reflectantes Mistral-Air®

Esta gama de mantas están equipadas de una parte superior reflectante, incrementando la capacidad de calentamiento y reflejando el calor del cuerpo radiante del paciente, preservando la temperatura corporal.



Mantas Mistral-Air® calidad Koala

Esta gama de mantas permite poner al paciente por encima de la manta. Están equipadas con una capa reflectante, con tiras de cinta adhesiva de esta manera puede envolver al paciente.

Otros productos de TSCI:
Fluido®AirGuard System
Calentamiento de sangre y líquidos



Fluido®Irrigation
Calentamiento de líquidos



Thermoflect®
Tecnología de calor reflectante



Socios en la gestión de la temperatura del paciente

TSCI es una empresa Europea líder en el campo de la hipotermia, y ofrece una amplia gama de soluciones, innovadoras para la gestión de la temperatura del paciente

Fluido® and Mistral-Air® son marcas registradas de TSCI.

Fluido® productos son cubiertos por las siguientes patentes: 1313521 and 1446179.

Otras patentes pendientes.

Thermoflect® es marca registrada de Encompass Group, LLC.

TSCI

The Surgical Company
International B.V.

Beeldschermweg 6F
3821 AH Amersfoort
The Netherlands

T +31 (0)33 450 72 50
F +31 (0)33 450 72 60
contact@tsci.nl
www.tsci.nl

 **The Surgical
Company**
GROUP


MA0220 / 320
Adulto




MA0230 / 330
Pediátrico




MA0250 / 350
Parte inferior del cuerpo

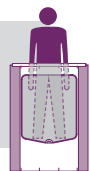


MA0260 / 360
Parte superior del cuerpo

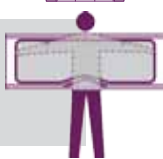


MA0265 / 365
Mitad de la parte superior del cuerpo

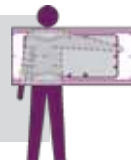

MA0270
Torso

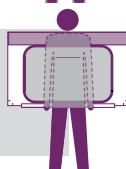


MA0280 / 290
Acceso quirúrgico

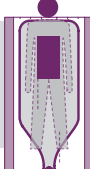

MA0510
Tubo



MA0340
Neonatal

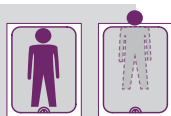

MA0400
Debajo del cuerpo entero



MA0450
Debajo del cuerpo



Mantas de calentamiento de aire forzado Mistral-Air®

Mantas Mistral-Air®

Referencia	Descripción	Dimensions
MA0220	Adulto	2180 x 1270mm
MA0230	Pediátrico	1450 x 1020mm
MA0250	Parte inferior del cuerpo	1420 x 1020mm
MA0260	Parte superior del cuerpo	2000 x 760mm
MA0265	Mitad de la parte superior del cuerpo	1600 x 760mm
MA0270	Torso	760 x 1240mm
MA0280	Acceso quirúrgico (estéril)	2200 x 1270mm
MA0290	Acceso quirúrgico	2200 x 1270mm
MA0510	Tubo	1750 x 150mm

Mantas Reflectantes Mistral-Air®

Referencia	Descripción	Dimensions
MA0320	Adulto	2180 x 1270mm
MA0330	Pediátrico	1450 x 1020mm
MA0350	Parte inferior del cuerpo	1420 x 1020mm
MA0360	Parte superior del cuerpo	2000 x 760mm
MA0365	Mitad de la parte superior del cuerpo	1600 x 760mm

Mantas Mistral-Air® Calidad Koal

Referencia	Descripción	Dimensions
MA0340	Neonatal	850 x 760mm
MA0400	Debajo del cuerpo entero	2150 x 1020mm
MA0450	Debajo del cuerpo	1630 x 1020mm

TSCI

The Surgical Company
International B.V.

Beeldschermweg 6F, 3821 AH Amersfoort, The Netherlands. T +31 (0)33 450 72 50, F +31 (0)33 450 72 60
contact@tsci.nl, www.tsci.nl VAT No. NL 8111.49.948.B.03 Cámare de Comercio (Amersfoort) No. 31029240

Calentador de aire forzado Mistral-Air®



Unidad de Calentamiento Mistral-Air® Plus

Referencia	MA1100-EU
Voltaje	220 - 240 VAC
Frecuencia	50 / 60 Hz
Corriente	3 A
Potencia media	525 W
Dimensiones	276 mm x 385 mm x 239 mm
Peso	± 6.0 kg
Longitud del tubo	1.8 m
Longitud del cable de alimentación	4.0 m
Temperatura establecida	32°C, 38°C, 43°C o aire ambiente
Filtración	HEPA, 0.3 µm, 99.99 %, H13 conform EN 1822
Garantía limitada	3 años
Clasificación 93/42/EEC & 2007/47/EC	Clase IIb
Clasificación IEC 60601-1	Clase I, cuerpo flotante (BF)
Clasificación IEC 60529	IP21



Carrito Mistral-Air®

Referencia	MA5100-B
Dimensión del soporte	1000 mm altura, $\varnothing$ 25 mm
Dimensión Base	$\varnothing$ 600 mm
Ruedas	5, anti-estáticas, libre de látex, 2 frenos
Dimensiones del cesto	230 mm x 230 mm x 250 mm
Peso	± 6.7 kg